


Appareil de friction statique et dynamique | N2901_U

Conforme aux normes

AFNOR NFQ 03.083, TAPPI T503,T815,T548, ASTM D202

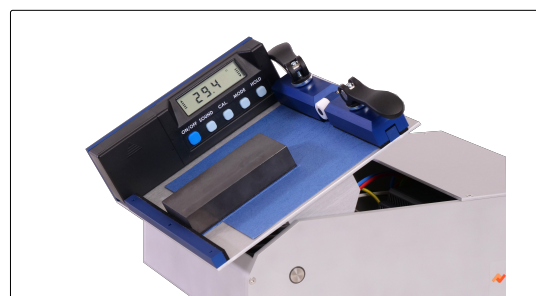

Description

Appareil permettant de déterminer le coefficient de friction par la méthode du plan incliné.

- Vitesse réglable selon la norme à respecter.
- Surface métallique plane équipée d'un lecteur digital de l'angle d'inclinaison.
- Plusieurs patins sont proposés suivant l'utilisation de l'appareil pour des contrôles de matériaux différents.
- La norme française recommande de respecter une pression de $16 \pm 8 \text{ g/cm}^2$.

Caractéristiques

110 – 230 V / 50 – 60 Hz

Contenu de la livraison

Appareil de glissement avec
bloc standard «A»
Câble de connexion
Mode d'emploi