


TAA | N6700

Conforme aux normes

ISO 12625-8

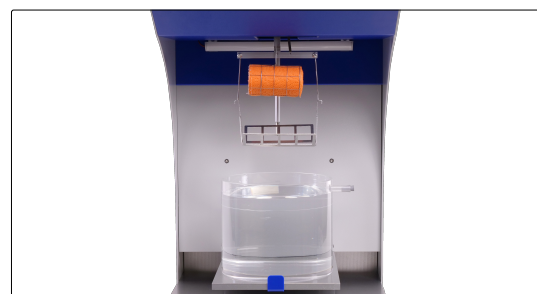

Description

Appareil permettant de mesurer le temps d'absorption et la capacité d'absorption de l'eau du "tissue".

- Entièrement conforme à la norme ISO 12625-8.

Le Tissue Absorption Apparatus permet automatiquement de :

- mesurer le poids sec du papier,
- mesurer le temps d'absorption de l'eau,
- mesurer le temps d'égouttage,
- mesurer le poids humide du papier,
- et de calculer la capacité d'absorption d'eau.

TAA | N6700

Spécifications techniques

Le temps d'absorption d'eau et le dispositif d'absorption d'eau permettent automatiquement:

- De mesurer le poids sec du papier
- De mesurer le temps d'absorption de l'eau
- De mesurer le temps d'égouttage
- De mesurer le poids humide du papier
- De calculer la capacité d'absorption d'eau

Le dispositif est composé de:

- Un récipient amovible pour recevoir de l'eau déminéralisée.
- Un petit robinet est placé sur le côté pour amener / laisser la surface du liquide à un niveau connu.
- Un système de fixation du panier au début de l'essai
- Un écran tactile affichant les résultats du test ainsi que la courbe de variation de poids au cours du temps.
- Un système d'"ascenseur" pour mettre au réservoir d'eau de se positionner correctement.
- Plusieurs boutons
- Une sortie USB
- Une sortie Ethernet
- Un fusible et une prise de courant

Le test est ensuite terminé et les résultats suivants sont affichés à l'écran:

- La référence de la mesure
- Date et l'heure
- Le temps d'immersion
- Le poids de l'échantillon sec
- Le poids de l'échantillon mouillé à la fin de l'égouttage
- Le rapport calculé de l'eau absorbée / poids de l'échantillon de papier
- Capacité d'absorption d'eau (Wa), en grammes par gramme pour chaque échantillon.
- La température de l'eau au moment de la mesure

Caractéristiques

Compatible Novilog
Une sortie USB
Une sortie Eth

Contenu de la livraison

Un appareil TAA
Un récipient amovible pour recevoir de l'eau déminéralisée.
Un panier cylindrique